



Slovgen s. r. o. , Diagnostic laboratory, ILKOVIČOVA 8, 841 04  
BRATISLAVA 4, Slovak Republic, tel : 00421 905 550 916, Reg. No. (ICO):  
35700629, VAT: SK2020906151, accounts: SK5511000000002626252786 (TATRSKBX);  
CZ885500000006107902001 (RZBCCZPP); Paypal FS5LN9AAC848S

Slovgen s.r.o. registered in Register of Companies at District court Bratislava I, in section Sro, number 1939/B

## INŠTRUKCIE NA ODBER VZORKY CYTOLOGICKÝMI KEFKAMI

Prosím postupujte podľa inštrukcií uvedených nižšie:

1. Odber biologického materiálu určeného na testy založené na analýze DNA môžu byť odobraté veterinárom, alebo samotným chovateľom. Veterinár môže zároveň potvrdiť svojim podpisom a pečiatkou pôvod biologického materiálu, t. z. že odber bol vykonaný jedincovi uvedenom v objednávkovom formulári.

2. Odber vykonávajte 1-2 hodiny po kŕmení, aby ste sa vyvarovali kontaminácii DNA matky prípadne z iných zdrojov. Každého psa izolujte od ostatných psov cca 1 hodinu pred odberom.

3. Ak je to možné obtierajte odberovú kefku až kým nedôjde k povrchovému krvácaniu ústnej sliznice. To zabezpečí dostatok buniek prichytených na cytologickej kefke.

4. Nie je možné vykonať genetický test, v prípade, že nie je dostatok genetického materiálu prichyteného na kefku. Preto je nevyhnutné poslať 2 kefky od každého zvierat'a. (V prípade objednania CEA-EVG analýzy 4 kefky od každého jedinca).


5. Je veľmi dôležité nechať kefky po odbere **uschnúť na vzduchu** približne 2-4 hodiny, kým nie je úplne suchá, najlepšie do druhého dňa.

6. Po odbere vložte cytologickú kefku naspäť do pôvodného obalu.

7. Obal označte identifikačnými údajmi ako meno psa, číslo čipu a pod.

8. Ak je to možné kefky zašlite hneď do laboratória. Ak to nie je možné uschovajte kefky na suchom mieste. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte a kontaktujte nás. [bielikova@slovgen.sk](mailto:bielikova@slovgen.sk), [skslovgen.dnalab@gmail.com](mailto:skslovgen.dnalab@gmail.com)

9. Ak nie je odber vykonaný správne a podľa pokynov, výsledok môže byť ovplyvnený kontaminujúcimi a inhibujúcimi faktormi (ako sú zvyšky jedla, mikroorganizmy, sliznica matky a pod.)

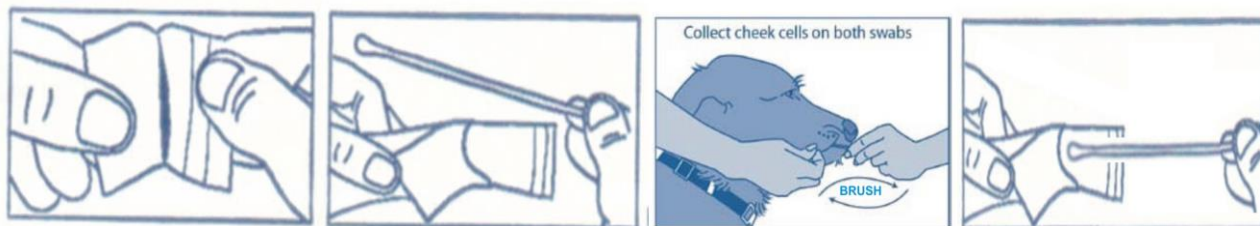



**Slovgen s. r. o. , Diagnostic laboratory, ILKOVIČOVA 8, 841 04  
BRATISLAVA 4, Slovak Republic, tel : 00421 905 550 916, Reg. No. (ICO):  
35700629, VAT: SK2020906151, accounts: SK5511000000002626252786 (TATRSKBX);  
CZ885500000006107902001 (RZBCCZPP); Paypal FS5LN9AAC848S**

Slovgen s.r.o. registrated in Register of Companies at District court Bratislava I, in section Sro, number 1939/B

Postup objednávky je nasledovný:

1. Veterinár vykoná odber krvi 2-3 ml do EDTA, alebo vykonáte odber vzoriek 2 kefy z každého psa. Najlepšie je izolovať každého psa pred odberom vzoriek na hodinu od ostatných. Kefky zasielame zdarma na vyžiadanie.
2. V prípade odberu vzoriek veterinárom, vyžiadajte si potvrdenie odberu na objednávkový formulár alebo na vytlačенú online objednávku. Potrebné je meno veterinára, číslo KVL, pečiatka a podpis. Ak nie je odber vzoriek potvrdený veterinárom na výsledkovom protokole bude uvedené: „**identita nebola overená**“.
3. Každý obal kefy musí byť označený menom psa alebo čipu ...
4. Kefy je potrebné nechať vyschnúť pri izbovej teplote. Každú kefu vložíte späť do pôvodného obalu. Nevkladajte kefy do plastových túb.
5. Vytvorte on-line objednávku alebo vyplňte formulár objednávky (v prílohách)
6. Odošlite vzorku s číslom online objednávky alebo spolu s papierovým objednávkovým formulárom .
7. Dostanete upozornenie hneď, ako prídu vzorky
8. Začneme analýzu
9. Faktúru dostanete po úspešnej analýze (alebo ak chcete skôr, po prijatí vzorky do laboratória - napíšte "faktúru hneď" na objednávkový formulár)
10. Zaplatíte za analýzu
11. Výsledky uvoľníme v databáze. Dostanete notifikáciu
12. Výsledky môžete stiahnuť z databázy
13. Ak ich chcete zaslať aj poštou vytlačíme a pošleme Vám papierové protokoly na Vašu poštovú adresu

Online objednávka:

Ak chcete podať objednávku prostredníctvom databázy, postupujte nasledovne:

1. prihláste sa do svojho účtu
2. vyberte novú objednávku
3. pre nové vzorky vyplňte meno, čip, číslo rodokmeňa, plemeno ..... alebo vyberte existujúcu vzorku
4. Ak chcete druhú vzorku, kliknite na tlačidlo vľavo dole: pridajte ďalšiu vzorku
5. vyplňte meno, čip, číslo rodokmeňa, plemeno ..... alebo vyberte existujúcu vzorku
6. kliknite na tlačidlo Ďalší krok
7. Vyberte zo zoznamu analýzy a stlačením tlačidla "Pridať do košíka" ju pridajte do objednávky pre prvú vzorku
8. Zvoľte analýzu zo zoznamu a stlačte 'Pridať do košíka' a pridajte ju k objednávke pre druhú vzorku ...atď
9. kliknite na tlačidlo Ďalší krok na Zhrnutie objednávky
10. Zvoľte spôsob platby: bankový prevod alebo Paypal
11. Výber protokolov o doručení: iba sťahovanie z databázy alebo aj poštou
12. Vyberte faktúru: Ihneď (získate prístup k výsledkom pri ich spracovávaní) - faktúra je odoslaná po prijatí vzoriek do laboratória alebo po dokončení všetkých analýz
13. Kliknite na tlačidlo Odoslať objednávku